



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYxy20240410 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	22302060
制造单位	江苏鱼跃医疗设备有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

批准人

宫友兰

(检定专用章)

核验员

杨富强

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

咸阳市计量测试所
证书骑缝章

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008



证书编号: XYxy20240410 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025.01.31

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24℃	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	-----	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值 0.4 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



检定证书

证书编号：XYxy20240409 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	台式
出厂编号	6305939
制造单位	江苏鱼跃医疗设备有限公司
检定依据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论	合格

批准人 宫友兰

(检定专用章)

核验员 杨富强

检定员 薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日



计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号
地址：咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangji@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008

共 4 页



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号：XYxy20240409 号

本次检定所使用的主要计量标准器：

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯 源 性：本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件：

地点：延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度：	24℃	湿度：	50%RH	其他：	----
-----	-----	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观：合格
2. 零位：合格
3. 血压计的灵敏度：合格
4. 血压计气密性：合格
5. 示值误差：允许值 ± 0.5 kPa，实际最大值-0.5 kPa。

以下空白

未经本所书面授权，不得部分复制本证书，本证书的检定结果仅对所检定器具有效。

检定证书

证书编号：XYxy20240408 号

送 检 单 位	延安大学咸阳医院有限公司
计 量 器 具 名 称	血压计
型 号 / 规 格	台式
出 厂 编 号	24787160
制 造 单 位	江苏鱼跃医疗设备有限公司
检 定 依 据	JJG 270-2008《血压计和血压表》
检 定 结 论	合格


(检定专用章)



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

批准人	宫友兰
核验员	杨富强
检定员	薛长龙

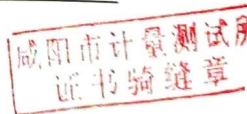

计量机构授权证书号：(陕)法计(2023) 610110000 号
地址：咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话：029-33213535
邮编：712000
传真：029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240408 号

本次检定所使用的主要计量标准器:					
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至	
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31	
溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准					
检定环境条件:					
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科					
温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	---
检定结果/数据					
1. 外观: 合格 2. 零位: 合格 3. 血压计的灵敏度: 合格 4. 血压计气密性: 合格 5. 示值误差: 允许值± 0.5 kPa, 实际最大值-0.4 kPa。 以下空白					

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。

检定证书

证书编号: XYxy20240407 号

送检单位 延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称 血压计
型号 / 规格 台式
出厂编号 28591110
制造单位 江苏鱼跃医疗设备有限公司
检定依据 JJG 270-2008《血压计和血压表》
检定结论 合格

(检定专用章)

批准人 宫友兰
核验员 杨富强
检定员 薛长龙



检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2024 年 10 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号
地址: 咸阳市秦皇中路 6 号
EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535
邮编: 712000
传真: 029-32209008



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20240407 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	YP20240265J	2025. 01. 31

溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一楼设备科

温度:	24°C	湿度:	50%RH	其他:	----
-----	------	-----	-------	-----	------

检定结果/数据

1. 外观: 合格
2. 零位: 合格
3. 血压计的灵敏度: 合格
4. 血压计气密性: 合格
5. 示值误差: 允许值 ± 0.5 kPa, 实际最大值-0.2 kPa。

以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。



咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

检定证书

证书编号: XYdy20240001 号

送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	电子血压计
型号 / 规格	HBP-1300
出厂编号	03037796LF
制造单位	OMRON
检定依据	JJG 692-2010《无创自动测量血压计》
检定结论	合格

(检定专用章)



批准人

宫友兰

核验员

宫友兰

检定员

薛长龙

检定日期 2024 年 04 月 23 日

有效期至 2025 年 04 月 22 日

计量机构授权证书号: (陕)法计(2023) 610110000 号

地址: 咸阳市秦皇中路 6 号

EMAIL: xianyangjl@hotmail.com

电话: 029-33213535

邮编: 712000

传真: 029-32209008





咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYdy20240001 号

本次检定所使用的主要计量标准器:				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
无创血压计监护仪检定仪	静态压力: (0~60) kPa [(0~450) mmHg] 收缩压: (2.7~34.0) kPa [(20~255) mmHg] 舒张压: (1.3~26.7) kPa [(10~200) mmHg]	0.05 级 血压示值重复性: ≤ 0.3 kPa (2 mmHg)	YS10241380Z	2025.02.03
溯 源 性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准				
检定环境条件:				
地点: 延安大学咸阳医院有限公司负一层器械科				
温度:	23℃	湿度:	51%RH	其他: ----
检定结果/数据				
1. 外观: 合格				
2. 静态压力测量范围: /				
3. 静态压力示值误差检定结果				
单位: mmHg				
标准压力值	血压计静态压力示值 p_{max} (或 p_{min})	静态压力示值误差		
60	60	0		
120	120	0		
180	182	2		
240	242	2		
285	286	1		
4. 血压示值重复性检定结果				
单位: mmHg				
血压设定值		血压示值重复性		
收缩压	150	0.9		
舒张压	100	0.9		
5. 气压系统气密性: /				
以下空白				

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。